

GARANTÍA

WillowWood garantiza cada One Sleeve desde la fecha de la factura por un período de noventa (90) días contra defectos de material y mano de obra.

Un producto devuelto durante el período de garantía será evaluado y reparado o reemplazado a discreción de WillowWood. Para evitar cargos por reposición, debe obtener un número de autorización de devolución de material (RMA) antes de la devolución de cualquier producto WillowWood. Llame al 740-869-3377 o al 800-848-4930 para obtener una RMA.

No existe garantía, expresa o implícita, por daños causados por abuso, mal manejo o accidente.

La garantía quedará anulada si no se siguen las instrucciones de instalación y cuidado de rutina. Para su protección y la nuestra, limpie minuciosamente todos los productos usados antes de devolverlos.

Renuncia a la garantía

WillowWood garantiza que cada producto fabricado, en el momento de la entrega, será de calidad profesional y sustancialmente libre de defectos. WILLOWWOOD NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, Y NO OFRECE GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Esta garantía terminará inmediatamente ante una acción para combinar nuestros productos con otros materiales o de cualquier manera para cambiar la naturaleza de nuestros productos. El único recurso es el reemplazo de los productos o el crédito por los productos. La responsabilidad de Willow Wood no excederá el precio de compra del producto. WillowWood no será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuente.

WillowWood Retención de derechos

WillowWood conserva todos los derechos de propiedad intelectual reflejados o incorporados en sus productos físicos, independientemente de la transferencia de los productos físicos a otra parte o partes.

RECORTANDO LA MANGA

La porción de silicona en el extremo proximal de One Sleeve se puede recortar si es necesario. No recorte la parte de la manga que está cubierta por tela.



Precaución: Los productos Alpha pueden derretirse o quemarse si se exponen a altas temperaturas o llamas. No exponga su producto Alpha a estas condiciones.



Precaución: Este producto Alpha está diseñado para usarse en un solo paciente. El uso del producto con múltiples pacientes podría provocar contaminación cruzada entre pacientes.



Advertencia: Para evitar el peligro de asfixia, mantenga este producto fuera del alcance de bebés o niños.



Advertencia: Sistema transtibial WillowWood One
Los componentes han sido diseñados y probados para su uso únicamente con otros componentes del sistema transtibial WillowWood One. El uso con otros sistemas de sellado puede provocar la pérdida de la suspensión y provocar lesiones.

WillowWood®

La compañía de madera de sauce de Ohio
15441 Scioto Darby Road
monte Sterling, OH 43143
teléfono 740.869.3377 / 800.848.4930
fax 740.869.4374 www.willowwoodco.com



Ohio Willow Wood Company BV
Keizersgracht 62/64
1015 CS Amsterdam
Los países bajos



PN-2510-A 13 MAR 2017

WillowWood®

Una manga

Instrucciones para el prótesis



QUÉ HAY EN LA CAJA

Una manga
Instrucciones para el usuario
Instrucciones para el prótesis

Estas instrucciones son para una funda One de repuesto solicitada para el sistema transtibial WillowWood One®.

Consulte las Instrucciones para el prótesis del sistema transtibial WillowWood One para obtener información completa.

Por favor proporcione al amputado la Instrucciones de uso incluidas en la caja.

QUITAR LA MANGA EXISTENTE

1. Doble el extremo grande de la funda hacia abajo sobre el encaje para exponer el extremo abierto del encaje.



Haga que el paciente salga del encaje.


Despliegue One Sleeve para que no cubra el encaje.

2. Desmontar el Un enlace como se muestra:



Retire la tapa One Link con junta tórica.



Retire la tuerca de un enlace.

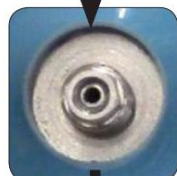

Retire el perno de la brida.

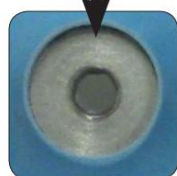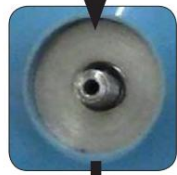

3. Separe el encaje flexible del encaje laminado.
4. Retire el One Sleeve del encaje flexible.

COLOCARSE UNA MANGA NUEVA


1. Ubique la parte anterior de One Sleeve.
2. Para facilitar el montaje, rocíe el exterior del casquillo flexible y el interior del manguito con alcohol.
3. Mientras el casquillo flexible y la funda todavía húmedos, deslice la funda sobre el casquillo flexible:



•El extremo más grande del manguito debe estar hacia la parte superior y el extremo más pequeño con las aletas de sellado debe estar hacia la parte inferior.

•El borde distal de la funda debe estar aproximadamente 2" (5 cm) por debajo de la línea de corte posterior del encaje.

4. Inserte el encaje flexible con One Sleeve en el encaje laminado. Alinee el orificio del casquillo flexible con el orificio One Link del casquillo laminado.

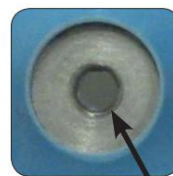

Agujeros alineados

Rocíe ligeramente las aletas del One Sleeve o el interior del encaje con alcohol si es necesario.

5. Inserte el perno de brida a través del casquillo flexible y el orificio One Link. Aplique Loctite® Threadlocker Blue 242® (o equivalente) al perno de la brida.



6. Utilizando un casquillo de 7 mm, instale la tuerca One Link en el perno de brida. Apriete a 25 in lb. No apriete demasiado.



7. Atornille el One Link Tapa con junta tórica.



8. Doble el extremo grande de la funda hacia abajo sobre el encaje para exponer el extremo abierto del encaje.



9. Haga que el paciente entre en el encaje y tire de la manga hacia arriba sobre el muñón.

