


ICEROSS DERMO SEAL-IN®



Iceross Dermo Seal-In incluye la tecnología de Seal-In en un diseño sin rodillera con membrana de sellado integrada. Iceross Dermo proporciona un contacto suave con la piel e incorpora los ingredientes de cuidado dérmico Active Skin Care, diseñados para pacientes con problemas vasculares y piel sensible.

La combinación de la silicona DermoGel con la cubierta de tejido elástico de alta resistencia Supplex crea una excelente durabilidad y un ajuste preciso. Combine la tecnología de Seal-In con el sistema de vacío Unity para la estabilización de las fluctuaciones del volumen y un cómodo ajuste del encaje durante todo el día.

- Elaborado con la silicona más suave, Iceross Dermo amortigua el muñón mientras cuida la piel de forma activa.
- Diseñado para satisfacer las necesidades de pacientes con problemas vasculares y aquellos con diabetes o piel sensible.
- La membrana que rodea la parte inferior del liner crea un sellado hermético cuando el usuario introduce el muñón en el encaje, lo que elimina la necesidad de una rodillera adicional para mantener el encaje en su lugar.
- El sistema Seal-In® también facilita la liberación del muñón para reducir la presión al sentarse.

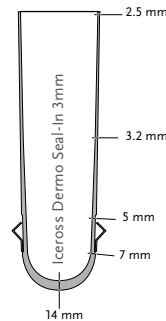

Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transtibial
Niveles de impacto:	Bajo a alto
Información del encaje de silicona	
Talla:	18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36.
Perfil:	3mm
Matriz:	10cm

MÉTODOS DE SUSPENSIÓN DISPONIBLES



SEAL-IN

CARACTERÍSTICAS



MATRIZ ESTABILIZADORA



CUBIERTA



CUIDADO ACTIVO DE LA PIEL



SUPERFICIE INTERNA SUAVE

REFERENCIAS DE PRODUCTOS - ICEROSS DERMO SEAL-IN

Ref.	Perfil	Suspensión	Matriz
I-4613XX	3mm	Seal-In	10cm