

ICEROSS SEAL-IN® X




Iceross Seal-In X ofrece a los usuarios la tecnología avanzada de Seal-In en un diseño sin rodillera con membrana de sellado separada y desplazable, que permite un estrecho ajuste para formas de muñón únicas y fluctuaciones de volumen. Fácil de invertir y colocar, también es adecuado para usuarios con bajo nivel de actividad y problemas de destreza manual. El tejido especial sin costuras de Iceross Seal-In X se extiende para ajustarse con precisión y comodidad sobre la rótula a fin de facilitar la flexión de la rodilla. La piel potencialmente frágil se nutre con la suave, aunque resistente, mezcla de silicona.

Las membranas de sellado están recubiertas con el revestimiento de baja fricción Easy Glide, lo que elimina la necesidad de rociar alcohol u otros lubricantes para la colocación del encaje. Existen tres opciones diferentes de membranas de sellado:

- X-Classic, la membrana clásica para el día a día;
- X-Grip, para un control adecuado de la rotación;
- X-Volume, que se adapta a una mayor reducción del volumen.

Es posible pedir nuevas membranas de sellado según las necesidades sin tener que adquirir un liner nuevo.

Combine la tecnología de Seal-In con el sistema de vacío Unity para la estabilización de las fluctuaciones del volumen y un cómodo ajuste del encaje durante todo el día.

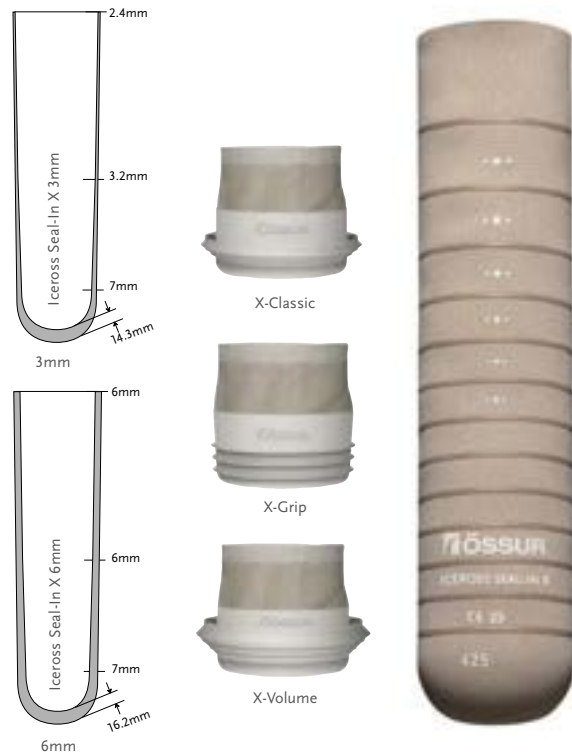

Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transtibial
Niveles de impacto:	Bajo a alto
Información del encaje de silicona	
Talla:	16, 18, 20, 22, 23, 5, 25, 26, 5, 28, 30, 32, 34, 36, 40*
Perfil:	3mm, 6mm
Tallas de membrana:	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 60, 65

*Talla 40 solo disponible en el perfil de 3mm.



MÉTODOS DE SUSPENSIÓN DISPONIBLES



SEAL-IN X

CARACTERÍSTICAS



CUBIERTA



CUIDADO ACTIVO DE LA PIEL



SUPERFICIE INTERNA SUAVE




EASY GLIDE

ICEROSS SEAL-IN® X

GUIA DE SELECCIÓN DE TALLA DE MEMBRANAS

1. Medir la circunferencia de la extremidad residual (en cm), directamente sobre la piel.
2. Consulte la tabla de tallas para estimar el tamaño correcto de la membrana
3. Leyenda: tamaño del sello X, circunferencia Y (cm), A-Ajuste apretado, B-Ajuste suelto

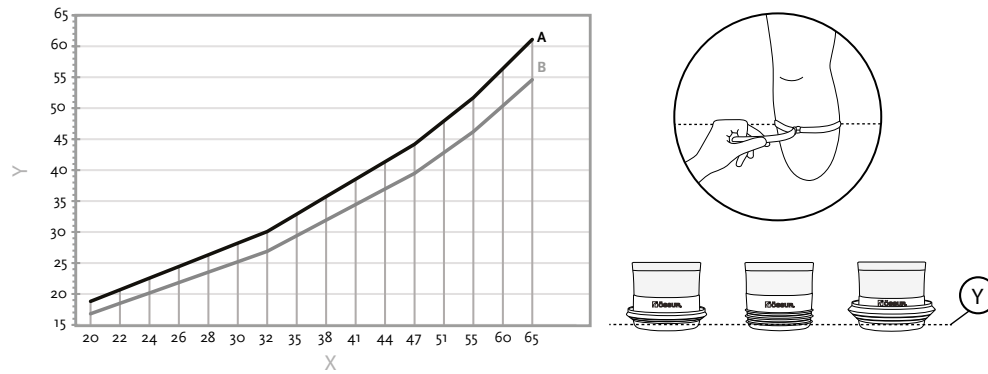

LONGITUD MÍNIMA RECOMENDADA DEL MIEMBRO RESIDUAL

Mida desde el medio del tendón de la rótula hasta el extremo distal. Compara el medido a la tabla a continuación.

Talla de liner	Longitud mínima
16-23,5	11cm
25-30	12cm
32-36	13cm
40	14cm

REFERENCIAS DE PRODUCTO - ICEROSS SEAL-IN X

N.º de ref.	Descripción	Contiene
I-4443XX	Iceross Seal-In X 3mm	Encaje
I-4446XX	Iceross Seal-In X 6mm	Encaje
I-SXC0XX	Iceross Seal-In X-Classic	Seal-In X-Classic - membrana
I-SXG0XX	Iceross Seal-In X-Grip	Seal-In X-Grip - membrana
I-SXV0XX	Iceross Seal-In X-Volume	Seal-In X-Volume - membrana
I-RXC001	Seal-In X-Classic Kit 26-51	10 Seal-In X-Classic - membranas
I-RXC004	Seal-In X-Classic Kit 20-65	16 Seal-In X-Classic - membranas
I-RXG001	Seal-In X-Grip Kit 26-51	10 Seal-In X-Grip - membranas
I-RXG004	Seal-In X-Grip Kit 20-65	16 Seal-In X-Grip - membranas
I-RXV001	Seal-In X-Volume Kit 26-51	10 Seal-In X-Volume - membranas
I-RXV004	Seal-In X-Volume Kit 20-65	16 Seal-In X-Volume - membranas