

EasyFlex™ Liner

N.º de patente 6,454,812* | 7,709,570 | 8,226,732 | 8,246,694 | 8,349,021

El liner protésico ALPS® EasyFlex™ ofrece a los usuarios facilidad de flexión de la rodilla gracias a una restricción ilimitada de la elasticidad en la parte anterior. En la parte posterior, el tejido mejora el control de la pierna protésica gracias a su limitada elasticidad vertical. El antioxidante de liberación prolongada que contiene EasyGel es un efectivo eliminador de radicales libres y grupos hidroxilo, con efectos beneficiosos para la piel. El liner EasyFlex™ se ha diseñado para usarlo con un sistema de suspensión de pin y bloqueo.



Material



EasyGel

Tejido



Tejido beige



Tejido marrón

Nivel de actividad



K1 ✓



K2 ✓



K3



K4

Espesor



3 mm



6 mm

Beneficios clave



Indicado para pieles delicadas y usuarios diabéticos gracias a los antioxidantes contenidos en el gel



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad de EasyGel de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Además alivia la piel de la tensión generada por las fuerzas de cizalladura gracias a su bajo coeficiente de fricción estática



Permite una fácil flexión de la rodilla y mejora el control de la pierna protésica, dado que se ha diseñado con dos tipos de tejido con elasticidades distintas



Suministrado con conexión distal para sistemas de suspensión de pin y bloqueo

EasyFlex™ Liner EZF. Tabla de medidas.

Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal.

Tamaño medido (cm)	Con pin 3 mm o 6 mm uniforme
16-19 cm	EZF16-(3 o 6)
20-23 cm	EZF20-(3 o 6)
24-25 cm	EZF24-(3 o 6)
26-27 cm	EZF26-(3 o 6)
28-31 cm	EZF28-(3 o 6)
32-37 cm	EZF32-(3 o 6)
38-43 cm	EZF38-(3 o 6)
44-53 cm	EZF44-(3 o 6)

Sección transversal




EZF

Con pin

MATRIZ REFORZADA

Extremos distales más anchos que son proporcionales al tamaño del liner

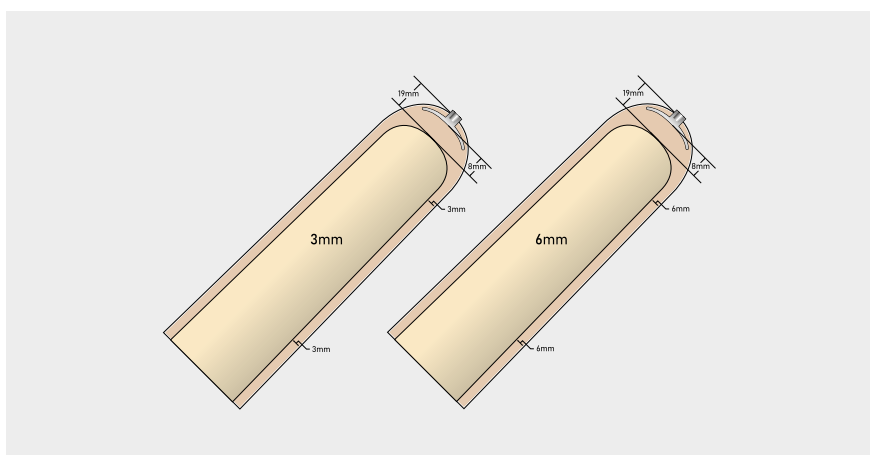

Choose Your Liner™

Encuentre su liner protésico ideal en 5 sencillos pasos

