

# Eco™ Liner

N.º de patente 6,454,812\* | 7,709,570 | 10,966,845 | 7,709,570

El liner ALPS® Eco™ incorpora un innovador tejido entretejido con zonas de elasticidad variable para mejorar el control de la pierna protésica. El Gel HD ayuda a mantener la extremidad residual más compacta y proporciona una estabilidad mejorada a la pierna protésica, al tiempo que garantiza un elevado nivel de protección frente a las fuerzas verticales y de cizalladura. La versión con pin incorpora una innovadora matriz en U para limitar la elasticidad vertical sin apretar la extremidad residual.



## Material



High Density Gel

## Tejido



Tejido  
entretejido sin  
costuras

## Nivel de actividad



K1



K2 ✓



K3 ✓



K4 ✓

## Espesor



3 mm

6 mm

## Beneficios clave



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad del Gel HD de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Asegura el máximo control de la pierna protésica y minimiza el movimiento de los tejidos blandos gracias al gel de alta densidad (HD).



Mayor comodidad gracias al efecto del innovador tejido entretejido sin costuras que proporciona zonas con distintos niveles de elasticidad



No oprime la extremidad residual y minimiza el efecto de pistoneo gracias a la innovadora matriz en U (versión con pin)

# Eco™ Liner ECDTHD/ECFRHD. Tabla de medidas.


Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal.

Tamaño medido (cm)	Con pin 3 mm o 6 mm uniforme	Sin pin 3 mm o 6 mm uniforme
20-23 cm	ECDTHD20-( 3 o 6)	ECFRHD20-( 3 o 6)
24-25 cm	ECDTHD24-( 3 o 6)	ECFRHD24-( 3 o 6)
26-27 cm	ECDTHD26-( 3 o 6)	ECFRHD26-( 3 o 6)
28-31 cm	ECDTHD28-( 3 o 6)	ECFRHD28-( 3 o 6)
32-37 cm	ECDTHD32-( 3 o 6)	ECFRHD32-( 3 o 6)
38-43 cm	ECDTHD38-( 3 o 6)	ECFRHD38-( 3 o 6)
44-53 cm	ECDTHD44-( 3 o 6)	ECFRHD44-( 3 o 6)

## Sección transversal




**ECFRHD**  
Sin pin

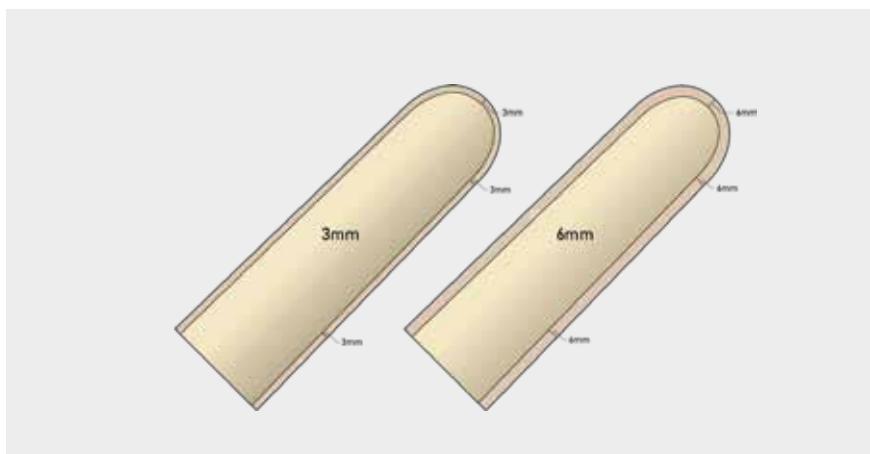

**ECDTHD**  
Con pin

**REFUERZO EN  
FORMA DE U**

Extremos distales  
más anchos que son  
proporcionales al  
tamaño del liner

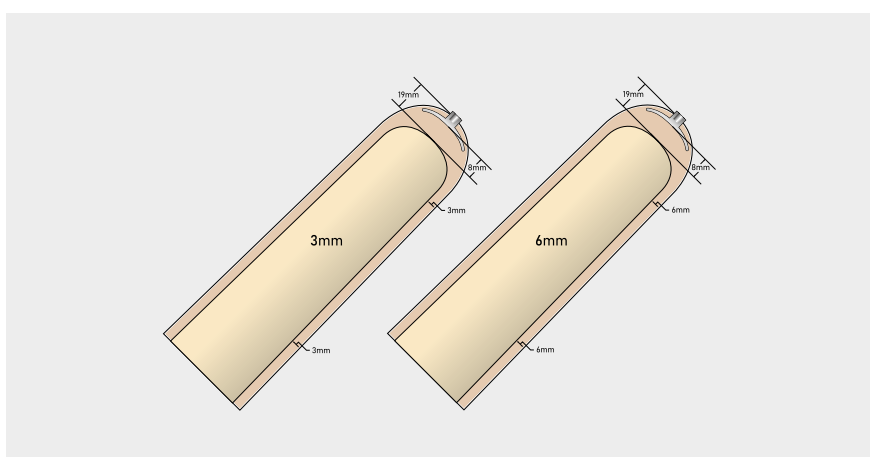

Choose Your Liner™

Encuentre su liner protésico ideal en 5 sencillos pasos

