

Extreme™ Liner

N.º de patente 6,454,812*

El liner protésico ALPS® Extreme combina la suavidad, resistencia y amortiguamiento de nuestro Grip Gel con un tejido con reducida elasticidad vertical. Mejora el control de la pierna protésica y reduce el pistoneo, al tiempo que ofrece una gran protección a la extremidad residual. La adhesión superior de Grip Gel permite una suspensión segura de la pierna protésica. El resultado es un liner cómodo y versátil indicado para usuarios con niveles de actividad bajo y medio.



Material



GripGel

Tejido



Tejido marrón

Nivel de actividad



K1 ✓

K2 ✓

K3 ✓

K4

Espesor



3 mm

6 mm

Beneficios clave



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad de Grip Gel de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Mejora el control de la pierna protésica gracias a la limitada elasticidad vertical del tejido



Reduce el pistoneo gracias a la limitada elasticidad vertical del tejido y la matriz distal (versión con pin)



Suspensión segura de la prótesis gracias a las propiedades adhesivas extraordinarias de Grip Gel

Extreme™ Liner AKDT/AKFR. Tabla de medidas.


Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal.

Tamaño medido (cm)	Con pin 3 mm o 6 mm uniforme	Sin pin 3 mm o 6 mm uniforme
16-19 cm	AKDT16-(3 o 6)	AKFR16-(3 o 6)
20-23 cm	AKDT20-(3 o 6)	AKFR20-(3 o 6)
24-25 cm	AKDT24-(3 o 6)	AKFR24-(3 o 6)
26-27 cm	AKDT26-(3 o 6)	AKFR26-(3 o 6)
28-31 cm	AKDT28-(3 o 6)	AKFR28-(3 o 6)
32-37 cm	AKDT32-(3 o 6)	AKFR32-(3 o 6)
38-43 cm	AKDT38-(3 o 6)	AKFR38-(3 o 6)
44-53 cm	AKDT44-(3 o 6)	AKFR44-(3 o 6)

Sección transversal




AKFR
Sin pin

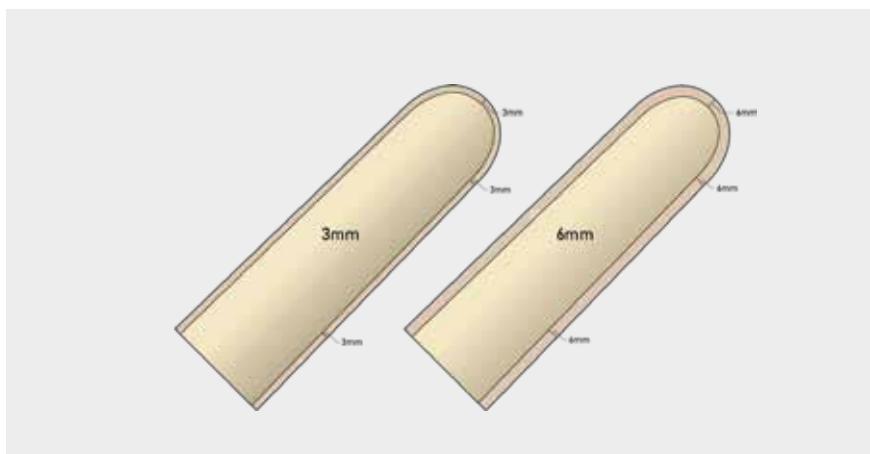

AKDT
Con pin

MATRIZ REFORZADA

Extremos distales más anchos que son proporcionales al tamaño del liner

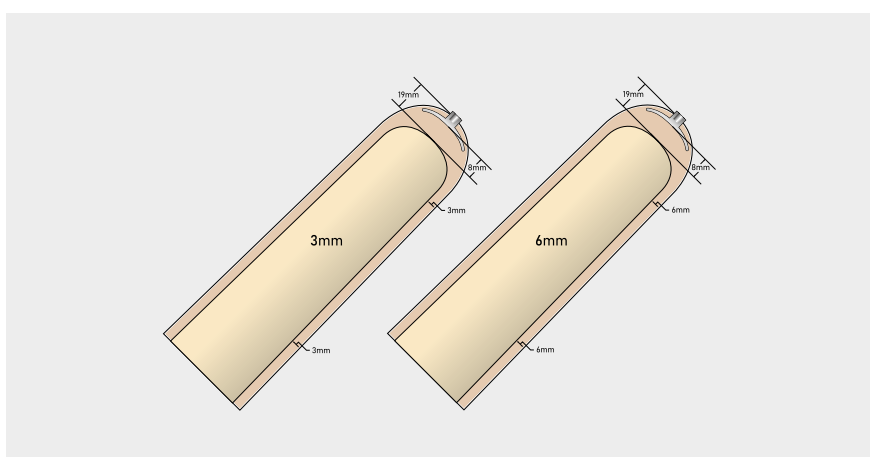

Choose Your Liner™

Encuentre su liner protésico ideal en 5 sencillos pasos

