


ICEROSS® SLEEVE



La Iceross Sleeve mantiene la succión y ofrece menos resistencia en la rodilla. Las ondas horizontales están diseñadas para facilitar la flexión de la rodilla. Una menor resistencia se traduce en un menor esfuerzo para flexionar la rodilla. Se estira de forma eficaz en la parte frontal y se pliega de forma controlada por detrás de la rodilla, manteniendo el sellado de los encajes de succión.

El perfil de la rodillera es más grueso en la zona que envuelve los bordes del encaje para concentrar la fuerza en zonas concretas y reducir el desgaste y el riesgo de rotura.

Össur recomienda usar Iceross Sleeve junto con la gama de liners Iceross Cushion con una válvula de expulsión.

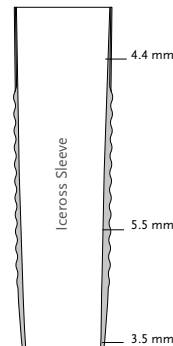

Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transtibial
Niveles de impacto:	Todos
Información del producto	
Talla:	35,41,49,55,62.

REFERENCIAS DE PRODUCTOS - ICEROSS SLEEVE

Mida la circunferencia 15cm por encima de la mitad de la rótula.

Ref.	Talla	Medida
F-201135	35	35-41cm
F-201141	41	41-49cm
F-201149	49	49-55cm
F-201155	55	55-62cm
F-201162	62	62-76cm