

Smart Seal™ Liner

N.º de patente 6,454,812* | 8,852,291 | 9,216,099 | 11,179,252 |
8,852,291 9,216,099 | 11,179,252

Para suspensión hipobárica

El liner ALPS® Smart Seal incorpora bandas de sellado integradas recubiertas de silicona que crean una interfaz segura. Las bandas se tensan contra la pared del encaje para impedir que el liner deslice. La capa interna de Gel HD, gracias a su bajo módulo de elasticidad, se adapta fácilmente a la extremidad residual sin restringir el flujo sanguíneo. Está disponible en dos configuraciones con distintas alturas de banda.



Material



High Density Gel

Tejido



Tejido
entretejido sin
costuras

Nivel de actividad



K1 ✓



K2 ✓



K3 ✓



K4 ✓

Espesor



3 mm 6 mm

Beneficios clave



Asegura un elevado nivel de control de la pierna protésica y minimiza el movimiento de los tejidos blandos gracias al gel de alta densidad.



Suspensión hipobárica no restrictiva gracias a sus bandas sellantes recubiertas de silicona integradas



Indicado tanto para usuarios transtibiales como transfemorales ya que las bandas sellantes están disponibles con dos configuraciones distintas



Máxima estabilidad del liner en el encaje gracias al gel de alta densidad y al uso de un tejido de elasticidad vertical reducida en la zona distal

Smart Seal™ Liner SAFR/SADT/SBFR. Tabla de medidas.

Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal.

Tamaño medido (cm)	SAFR - Sin pin 3 mm o 6 mm uniforme
26-27 cm	SAFR26-(3 o 6)
28-31 cm	SAFR28-(3 o 6)
32-34 cm	SAFR32-(3 o 6)
35-37 cm	SAFR35-(3 o 6)
38-43 cm	SAFR38-(3 o 6)

SAFR

La bandas comienzan a unos 12,5 cm desde el centro del extremo distal.

SBFR

La bandas comienzan a unos 7,5 cm desde el centro del extremo distal.

SADT

Tallas 20-28: la bandas comienzan a unos 7,5 cm desde el centro del extremo distal.

Tallas 32-38: la bandas comienzan a unos 12,7 cm desde el centro del extremo distal.


Tamaño medido (cm)	SBFR - Sin pin 3 mm o 6 mm uniforme
20-23 cm	SBFR20-(3 o 6)
24-25 cm	SBFR24-(3 o 6)
26-27 cm	SBFR26-(3 o 6)
28-31 cm	SBFR28-(3 o 6)

Tamaño medido (cm)	SADT - Con pin 3 mm o 6 mm uniforme
20-23 cm	SADT20-(3 o 6)
24-25 cm	SADT24-(3 o 6)
26-27 cm	SADT26-(3 o 6)
28-31 cm	SADT28-(3 o 6)
32-37 cm	SADT32-(3 o 6)
38-43 cm	SADT38-(3 o 6)

Sección transversal




SAFR/SBFR
Sin pin

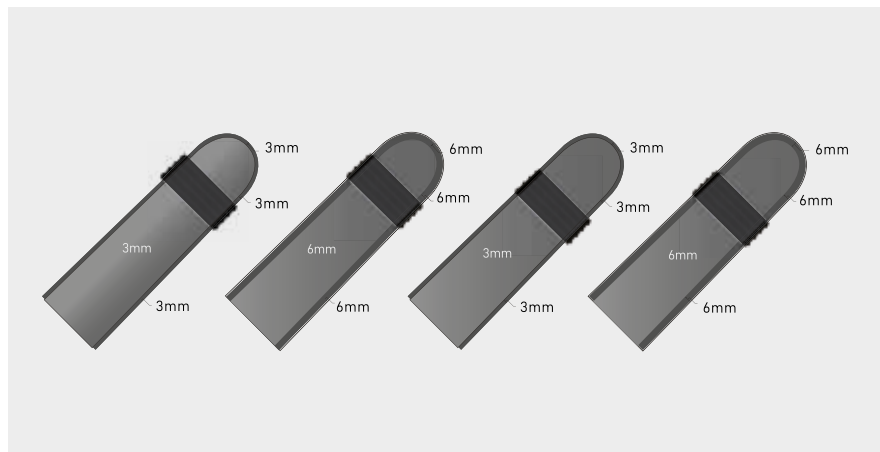

SADT
Con pin

**REFUERZO EN
FORMA DE U**

Extremos distales
más anchos que son
proporcionales al
tamaño del liner

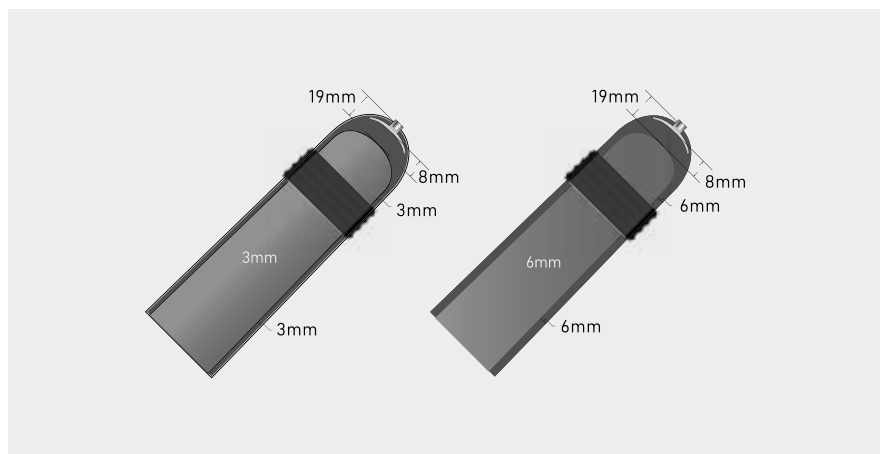

Choose Your Liner™

Encuentre su liner protésico ideal en 5 sencillos pasos

