

Superior Performance Liner

N.º de patente 6,454,812*

El liner protésico ALPS® Superior Performance combina un tejido con elasticidad vertical limitada con nuestro Grip Gel.

Grip Gel, con su suavidad, resistencia y amortiguamiento proporciona la mayor protección posible a la extremidad residual. El tejido, gracias a su elasticidad vertical limitada, mejora el control y la estabilidad de la pierna protésica reduciendo el pistoneo. El resultado es un liner cómodo indicado para usuarios con niveles de actividad bajo y medio.



Material



GripGel

Tejido



Tejido negro

Nivel de actividad



K1 ✓

K2 ✓

K3 ✓

K4

Espesor



3 mm

6 mm

Beneficios clave



Protege la extremidad residual gracias a la gran capacidad de Grip Gel de absorber las fuerzas verticales y de cizalladura



Mejora el control de la pierna protésica gracias a la limitada elasticidad vertical del tejido



Reduce el pistoneo gracias a la limitada elasticidad vertical del tejido y la matriz distal (versión con pin)



Suspensión segura de la pierna protésica gracias al alto nivel de adhesión de Grip Gel

Liner Superior Performance SPDT/SPFR. Tabla de medidas.


Mida la circunferencia de la extremidad residual 6 cm por encima del extremo distal.

Tamaño medido (cm)	Con pin 3 mm o 6 mm uniforme	Sin pin 3 mm o 6 mm uniforme
16-19 cm	SPDT16-(3 o 6)	SPFR16-(3 o 6)
20-23 cm	SPDT20-(3 o 6)	SPFR20-(3 o 6)
24-25 cm	SPDT24-(3 o 6)	SPFR24-(3 o 6)
26-27 cm	SPDT26-(3 o 6)	SPFR26-(3 o 6)
28-31 cm	SPDT28-(3 o 6)	SPFR28-(3 o 6)
32-37 cm	SPDT32-(3 o 6)	SPFR32-(3 o 6)
38-43 cm	SPDT38-(3 o 6)	SPFR38-(3 o 6)
44-53 cm	SPDT44-(3 o 6)	SPFR44-(3 o 6)

Sección transversal




SPFR
Sin pin

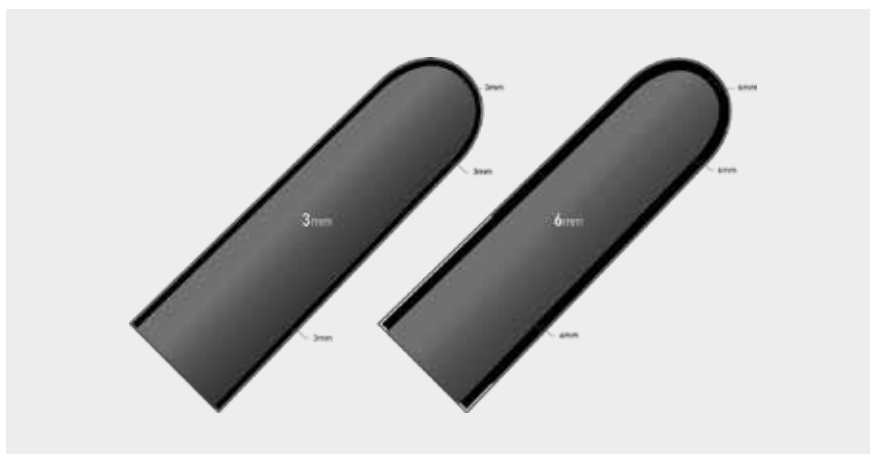

SPDT
Con pin

MATRIZ REFORZADA

Extremos distales más anchos que son proporcionales al tamaño del liner

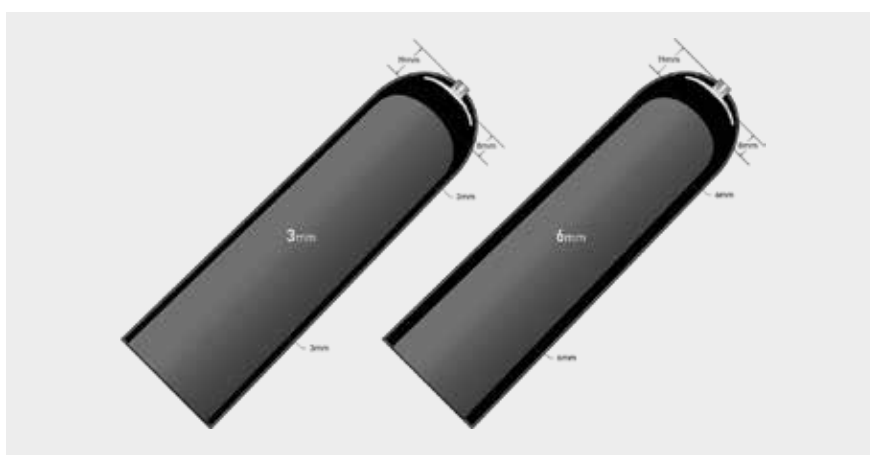

Choose Your Liner™

Encuentre su liner protésico ideal en 5 sencillos pasos

